


Test al lattice

Microgen Legionella

M45

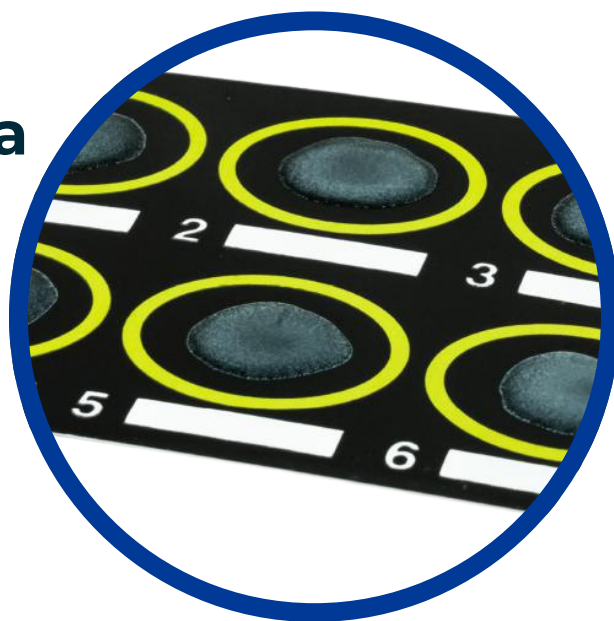

Test rapido di agglutinazione al lattice che fornisce risultati rapidi in pochi minuti direttamente su terreno selettivo per conferma dell'identificazione di:

- *Legionella pneumophila* sierogruppo 1 e sierogruppi 2-15;
- Specie di *Legionella* di rilevanza clinica diverse da *L. pneumophila*.

Il kit **Microgen Legionella** permette di identificare le specie di *Legionella* diverse da *pneumophila* e con elevata specificità e nessuna reazione crociata con *L. pneumophila*.

I test al lattice utilizzati infatti sono rivestiti immunoglobuline appositamente trattate per ridurre al minimo i possibili problemi di reazione incrociata ed eliminando così la necessità di un lattice di controllo.

Il test è conforme alla norma **ISO 11731 Water Quality – Detection and enumeration of Legionella**.

Contenuto del kit

- **M45a - Reagente per il Test** (Tappo blu) da 2,5 mL: Particelle di lattice rivestite con anticorpi policlonali di coniglio per sierogruppo 1 di *L. pneumophila*. Con azide sodica allo 0,099% come conservante;
- **M45b - Reagente per il Test** (Tappo giallo) da 2,5 mL: Particelle di lattice rivestite con anticorpi per sierogruppi 2-15 di *L. pneumophila*. Con azide sodica allo 0,099% come conservante;
- **M45c - Controllo Positivo** (Tappo nero) da 1,0 mL: Sospensione di antigeni di Legionella inattivati reattivi con i Reagenti per il Test 1, 2-15 e Specie. Con azide sodica allo 0,099% come conservante;
- **M45d - Reagente per il Test Specie** (Tappo rosso) 2 x 5,0 mL: Particelle di lattice rivestite da anticorpi policlonali di coniglio relativi a 10 specie di *Legionella* comunemente isolate. Con azide sodica allo 0,099% come conservante;
- **M40** Soluzione salina isotonica allo 0,85%: 2 x 5,0mL

Specie di *Legionella* identificabili:

- *L. pneumophila* sierogruppi 1 e 2 - 15
- *L. micdadei*
- *L. bozemanii* I & II
- *L. dumoffii*
- *L. longbeachae* I & II
- *L. jordanis*
- *L. gormanii*
- *L. anisa*
- *L. feeleyi*